


Testergebnisse nach NF X 15-140 für LKPv, LGPv Laborgeräte

Die Auswertung der Luft-Temperaturen im Innenraum nach dem Testverfahren NF X 15-140 gemessen mit PT 100 Messelementen bestückt mit 25 g Kupfermasse ergibt für die LKPv und LGPv Labor-Kühlgeräte:


Liebherr Gerät LKPv 6520

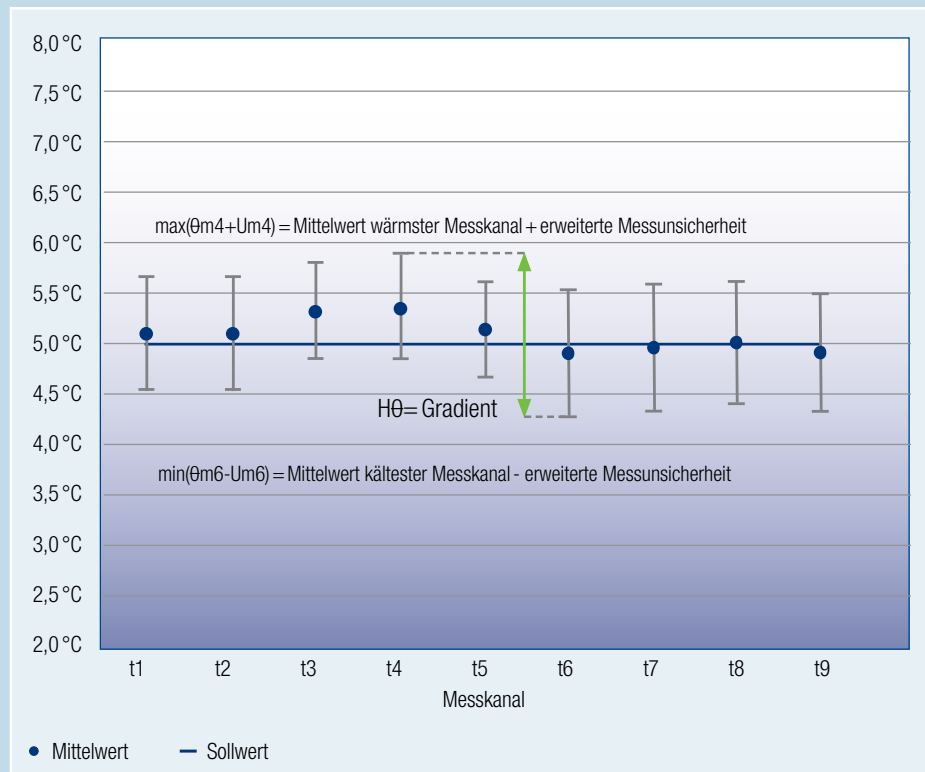

Gradient $H\theta$: **1.8 K** (+0.9 K / -0.9 K Abweichung von der eingestellten Temperatur)

Max. Fluktuation: **1.0 K**

Liebherr Gerät LKPv 6522

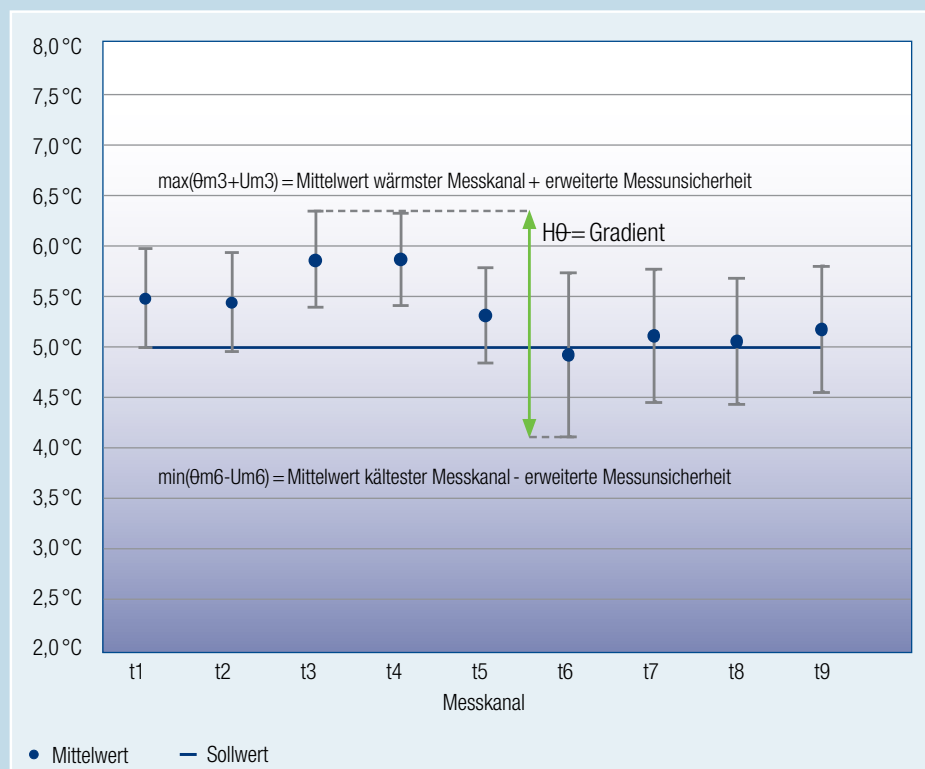

Gradient $H\theta$: **2.3 K** (+1.4 K / -0.9 K Abweichung von der eingestellten Temperatur)

Max. Fluktuation: **1.6 K**